

乳幼児・小児の処置一般に……

小児科、救急外来向け処置用抑制具

レストレイナー・ペディ

型 式 CR-3



◎ 本体形状を左右対称の長方形にしました。

歯科用のレストレイナーでは、肩と足が決まっていたため、体の位置決めに不自由なことがありました。この製品では、処置治療部位による頭足方向の位置決めに、自由度が増しました。

◎ 本体を厚くし、フックの取付位置を改良しました。

フックの先端位置を、高く、外側に来るようにしました。これによりネットをフックにかける操作がしやすくなりました。

◎ イメージを明るくしました。

レザーシートを明るい色調の柄物に、本体部分をベージュ色に変え、検査や治療を受ける親御さんへの不安な気持ちを少しでも和らげられるように配慮しました。



NIKKO FINES INDUSTRIES CO., LTD.

■ ■ 特 長 ■ ■

…承継する特長…

- ・ネットにて全身を包むように固定しますので固定が確実で、処置中ずれるようなことはありません。
- ・固定に使用するネットは、通気性が優れており、長い時間の処置にも発汗など少なくてすみます。
- ・固定の操作は極めて容易です。ネットを手前側のフックに掛けるだけで完了します。
- ・肩固定ベルト(オプション)をセットすることにより、更に上半身の固定が確実になります。
- ・JN式ポジショニングブロック(オプション)を併用することにより、より自由な体位で固定できます。

■ ■ 使用 方 法 ■ ■

- ・レストレイナー・ペディを診察台の上に置きます。
- ・患者をレストレイナー・ペディの上に寝かせ、軽く押さえながら、ネットをフックにゆるみのないように、肩から膝下まで均等に掛けます。

※本体の幅に比べ、体格の小さい患者の時には、身体の両側にできる空間にバスタオルなどをつめると、より安定した固定ができます。

※新生児の場合、あらかじめ上半身からつま先までをバスタオルでくるむと、固定効果が高まると同時に、足指先がネットに掛かる事故を防げます。

※肩固定ベルトをお使いの場合、ネットで固定した後、肩固定ベルトを引張り胸側のネットにフックを掛けます。これにより上方への動きが防止できます。




CR-3Lの例



CR-3Sの例

■ ■ 寸 法 ■ ■

型式 CR-3L

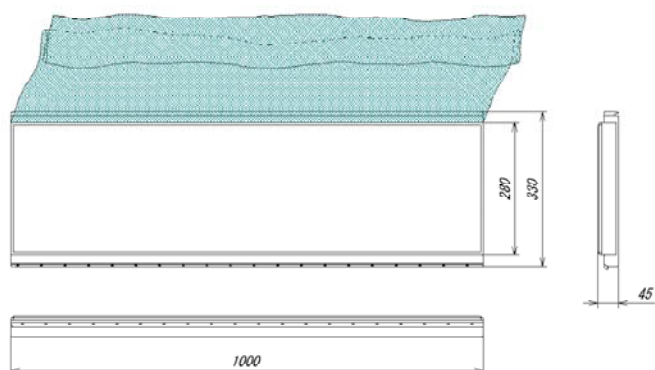

患者の体格に合わせて3種類の寸法をご用意しています。

	長さ	幅
CR-3L	1,000	330
CR-3M	700	300
CR-3S	500	270

(単位：mm 寸法許容差±10mm)

オプション

- ・肩ベルト 100×400mm(2本組)
- ・ポジショニングブロック

※別途お問い合わせください

《使用上の注意》

- 本品は動く患者を抑制して、処置中その体位を保持するものです。これ以外の目的に使用しないでください。特に睡眠薬や全身麻酔投与後の患者には、絶対に使用しないでください。
 - ネットはゆるみのないように均等に掛けてください。不十分ですと、身体が移動し頸部を圧迫することがあります。また、肩より上には掛けしないでください。
 - 固定は足首までにとどめ、つま先には掛けしないでください。
 - 手や足の指がネットの目に引っかからないように、手袋、靴下、バスタオル等で必ず保護してください。
 - ネットが直接皮膚に触れないよう、バスタオル等で保護するよう配慮してください。
 - 患者が大量に嘔吐した時は、本体ごと側転させ、気管内に嘔吐物が入らぬように注意してください。
 - 処置中に患者の異常が発生した場合には、直ちに固定を解除し、適切な処置をしてください。
 - 長時間にわたっての使用は避けてください。
 - 本品は医療行為以外の目的では、使用しないでください。
 - 本品は薬事法で定める医療機器には、該当しません。
- ※ご使用の際は、製品の取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。

※仕様は予告なく変更することがありますのでご承知ください。

お問い合わせ・ご注文は

製造元



日興ファインズ工業株式会社

〒125-0062 東京都葛飾区青戸4丁目21番12号
TEL. 03-3601-1168 FAX. 03-3601-1160
<http://www.nikkofines.co.jp>

0711. NFK